



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE VERTICAL MODELO: AV MARCA: PHOENIX LUFERCO	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Phoenix Luferco; MODELO :AV

1.2. Fornecedor: PHOENIX Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos LTDA

1.3. Endereço: Araraquara SP

1.4.Site: www.phoenix.ind.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. A Autoclave é destinada para a esterilização de materiais e utensílios em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e consultórios médicos em geral. O seu processo de esterilização é feito através do vapor de água saturado, onde certa quantidade de água é aquecida através de um conjunto de resistências elétricas, proporcionando assim a geração de vapor necessária.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- Painel de controle

3.2- Capacidades até 100 litros

3.3- Chave comutadora de 3


3.4- Tampa que sobre a dobradiça pivotada

3.5- Pedal situado na parte inferior frontal.

3.6- Válvula Antivácuo

3.7- Manômetro

3.8- Temperatura de 120°C a 127°C

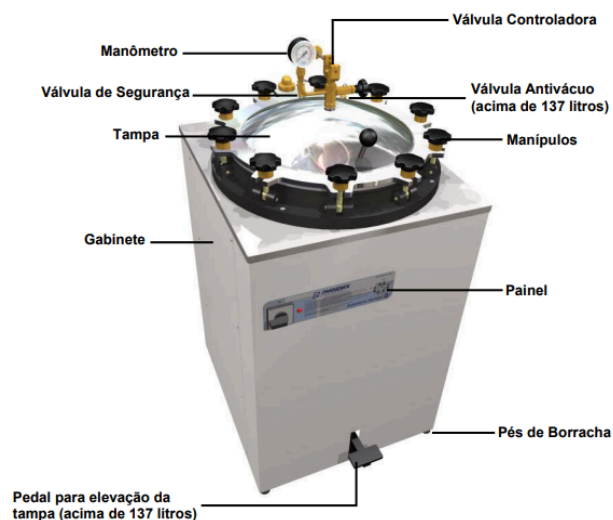

Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.2. O equipamento deverá ser instalado em “ambiente aberto”, isto é, não deverá ser confinado entre paredes.

4.3. O equipamento deverá estar afastado, no mínimo, 50 centímetros de paredes e outros equipamentos.

4.4- Use somente água destilada.

4.5- Antes de iniciar a instalação, verifique os dados da etiqueta de identificação fixada no equipamento. Assegure-se que a tensão seja a mesma da rede a ser instalado e assegure-se que a chave liga/desliga encontra-se na posição desliga. A variação máxima de tensão é de 5% em relação à tensão nominal da rede.

4.4. MODO DE OPERAÇÃO:

4.4.1. Abrir a tampa e introduzir o material a ser esterilizado;


4.4.2. Fechar a tampa apertando os manípulos (B) por igual (em forma de cruz).

4.4.3. Abrir o registro de vapor (C) e ligar a chave comutadora no calor (MÁX).

4.4.4. Aguardar a saída de vapor no bico do registro (E) e em seguida fechá-lo.

4.4.5. Atingida a pressão de trabalho (A), que deverá ser ajustada deslocando-se o contra peso (D) para frente (menor pressão) ou para trás (maior pressão), mudar a chave comutadora para o calor médio (MED) para manter esta pressão.

4.4.6. Terminado o tempo de esterilização, desligar a chave comutadora (DESL), abrir o registro de vapor (C), esperar o manômetro (A) voltar a zero e em seguida abrir a tampa.

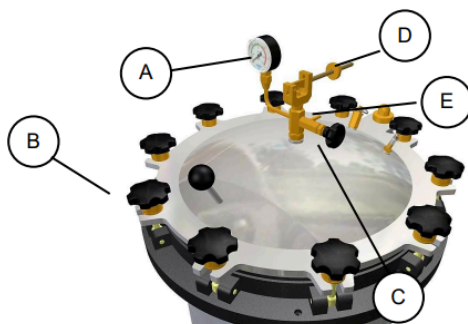

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. LIMPEZA GERAL:

5.1.2 A limpeza do gabinete deve ser realizada com a utilização de panos macios e produtos não agressivos.

5.1.3. A limpeza da caldeira deve ser realizada com a utilização de panos macios e produtos não agressivos ao aço inoxidável.

5.1.4. Nunca utilizar palha ou esponja de aço para efetuar a limpeza da caldeira, pois os resíduos depositados na superfície polida poderão contaminar a mesma favorecendo o processo de corrosão.

5.1.5. Limpeza dos cestos recomenda-se a utilização de produtos apropriados para a limpeza tais como sabão neutro, detergente neutro e pano umedecido. Após o enxágüe, secar e passar um pano embebido a álcool para desinfecção.

5.1.6. Para uma maior vida útil da guarnição da tampa, limpar diariamente a mesma com álcool a fim de se retirar resíduos de sujeira que possam estar depositados. Após a limpeza lubrificar toda a extensão da guarnição com talco neutro evitando-se excessos de talco, deixando apenas uma camada de proteção.

5.2. LIMPEZA DIÁRIA:

5.2.1 Limpar internamente a caldeira

5.2.2. Limpar o(s) cesto(s) e o suporte do mesmo.

5.2.3. Limpar a guarnição da tampa.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Os operadores que usam a autoclave devem ser treinados para esta atividade. Nunca permita que pessoas não treinadas utilizem o equipamento.

6.2. Luvas protetoras devem ser usadas sempre que o operador estiver em contato com a câmara de esterilização aquecida.

6.3. Não abra a porta do equipamento se a pressão indicada no manômetro não estiver em 0 Kgf/cm².

6.4. Nunca utilize o equipamento sem água.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1. A manutenção e o reparo devem ser realizados por pessoal técnico habilitado.

7.2. Desligar a energia elétrica antes de se iniciar os serviços de manutenção ou reparo do equipamento.

7.4. Tomar cuidado com todas as partes internas não protegidas do equipamento, já que estas podem causar queimaduras durante a manutenção e reparo do mesmo.

7.5. Ferramentas pontiagudas não devem ser usadas para colocar ou remover a vedação da caldeira.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.