

INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: ESTUFA DE SECAGEM MODELO: S150ST MARCA: BIOPAR	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Biopar, Modelo S150ST

1.2. Fornecedor: Biopar Equipamentos Eletro Eletronico LTDA

1.3. Endereço: Imperador Hiroito (Distrito Industrial Restinga),935- Porto Alegre- RS.
CEP: 91791-500

1.4. Site: www.camargoindustrial.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Utilizada para esterilizar materiais como vidrarias e instrumentos metálicos. Também é empregada na secagem de amostras e utensílios de laboratório. É ideal para laboratórios que exigem controle de contaminação e umidade.

3. Componentes do Equipamento:


3.1. Painel de controle: utilizado no acionamento, programação e controle de temperatura.

3.2. Lâmpada de aquecimento: indica o aquecimento do equipamento, quando acesa.

3.3. Botão de regulação de temperatura.

3.4. Chave geral – interruptor de funcionamento Liga / Desliga.

3.5. Trilhos internos para deslocamento das bandejas.

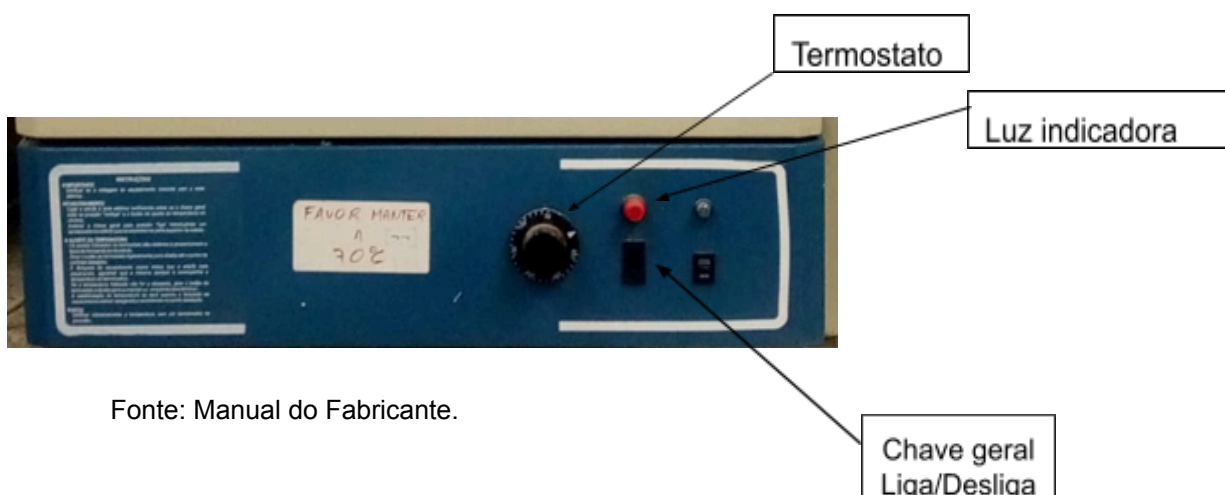

Fonte: Manual do Fabricante.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

A estufa deve ser instalada em uma superfície plana, firme e nivelada, em local bem ventilado e longe de fontes de calor, umidade ou materiais inflamáveis. É necessário garantir espaço ao redor do equipamento para dissipação de calor.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1. Observe a voltagem da estufa (220 V) e conecte-a na tomada com a mesma tensão.

4.2.2. Ajuste a temperatura desejada no termostato, conforme a necessidade do processo.

4.2.3. Aguarde o pré-aquecimento até a estufa atingir a temperatura selecionada.

4.2.4. Coloque os materiais a serem esterilizados ou secos no interior da estufa, distribuindo-os sem obstruir a circulação de ar.

4.2.5. Mantenha a porta fechada durante todo o processo para preservar a estabilidade térmica.

4.2.6. Aguarde o tempo necessário para o ciclo (esterilização e secagem).

4.2.7. Desligue a estufa após o uso e só retire os materiais quando a temperatura interna estiver segura para manuseio.



Fonte: Manual do Fabricante.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Ao efetuar a limpeza deve-se desligar o equipamento da rede elétrica e realizar com o equipamento em temperatura ambiente.

5.2. Utilize um pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro para limpar a parte externa e interna da câmara.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Nunca coloque materiais inflamáveis ou plásticos que possam derreter no interior da estufa.

6.2. Evite abrir a porta durante o funcionamento para não comprometer a estabilidade da temperatura.

6.3. Use luvas térmicas ao manusear materiais aquecidos.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1 Realize inspeções periódicas para verificar o funcionamento do termostato, resistência elétrica e sistema de ventilação. Limpe regularmente o interior e exterior para evitar acúmulo de resíduos. Verifique conexões elétricas e cabos para evitar riscos de curto-circuito.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2 Norma de Boas Práticas do Laboratório.