



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MODELO: MS 3000 MARCA: GEHAKA	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Gehaka; MODELO: MS 3000

1.2. Fornecedor: Ind. e com. Eletro Eletrônica Gehaka Ltda

1.3. Endereço: AV. Duquesa de Goiás, 235, Real parque- São paulo- SP

1.4.Site: www.gehaka.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1.O ultrapurificador de água foi projetado para proporcionar a mais elevada qualidade de água, completamente livre de impurezas e contaminantes. Desde a remoção de sedimentos até a eliminação de produtos químicos indesejados.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- a) Display gráfico colorido touch

3.2- b) Tampa superior

3.3- c) Tampa lateral esquerda

3.4- d) Tampa lateral direita

3.5- e) Ponto de serviço

3.6- f) Suporte de caneta touch

3.7-g) Impressora térmica

3.8- h) Chave liga/desliga

3.9- i) Filtros.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1. Coloque seu equipamento sobre uma bancada fixa, próximo a um ponto de alimentação e descarte de água.

4.1.2. A bancada escolhida deve suportar no mínimo 40 Kg.

4.1.3. Antes de iniciar o equipamento, efetue a instalação da bobina de papel na impressora.


4.1.4 Corte um tubo flexível no comprimento conveniente para conduzir o fluxo do ponto de alimentação de água.

4.1.5 O registro de entrada deverá permanecer sempre aberto.

4.1.6. Instale o registro de entrada $\frac{1}{2}$ " no ponto de água (alimentação) e, caso a tubulação seja de $\frac{3}{4}$ ", utilize uma bucha de redução.

4.1.7. Corte um tubo flexível para conduzir o fluxo do descarte até um ralo ou pia (recomendamos realizar a identificação dos tubos para facilitar o entendimento dos operadores no dia a dia).

4.1.8. Conecte o cabo AC no painel traseiro, tomando o devido cuidado para que o plugue seja totalmente inserido. Após isso, conecte o cabo na tomada (equipamento bivolt).

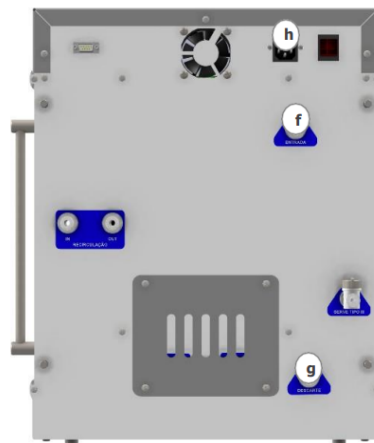

Fonte: Manual do Fabricante.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1. Gire o suporte e ajuste sua altura da forma mais adequada para o recipiente que estiver sendo utilizado.

4.2.2. Verifique se o volume desejado foi configurado corretamente, caso contrário, configure-o seguindo as orientações do item anterior. Para disponibilizar a água, basta selecionar o ícone gota.

4.2.3. O ícone gota muda seu preenchimento em função do volume de água disponível no tanque de recirculação. Quando restar apenas um risco internamente, isso significa que o MS300 tem o menor volume disponível (cerca de 4 litros).


4.2.5. Imprime Relatório: Essa função gera um relatório completo com as informações das medidas atuais da qualidade da água e de todos os elementos filtrantes com suas respectivas datas de validade.

4.2.6. Sanitiza Sistema: Esse item é responsável pela rotina de sanitização do MS3000. Nessa opção, o equipamento irá efetuar todos os procedimentos para garantir uma água com a qualidade desejada.

4.2.7. Esvazia Tanque:Essa função permite que seja esvaziado o tanque de 12 litros.

4.2.8. Altera Senha é responsável pela alteração da senha de acesso ao Menu de Configuração. Poderá ser digitada uma senha com 1 até 8 caracteres.

4.3. PAINEL DAS CONFIGURAÇÕES:

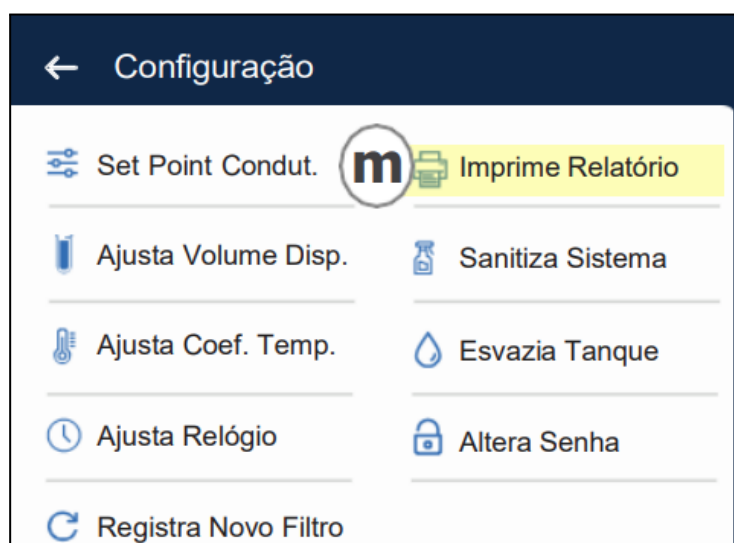

Fonte: Manual do Fabricante

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. sanitizar o filtro microbiológico periodicamente. (Exemplo: Se o valor máximo permitido de UFC = 100/mL, a desinfecção deverá ser realizada quando UFC > 50/mL).

Obs.: nunca fazer a limpeza com o equipamento ligado.

5.2. Sistêmica: proceder a cada ano, a fim de evitar o crescimento microbiano e principalmente a formação de biofilmes no sistema MS3000.

5.3. O processo de desinfecção/sanitização do MS3000 é automático, necessitando apenas da inserção do biocida.

5.4. O glutaraldeído (AP600) é um biocida de ação rápida especialmente desenvolvido para higienização, assepsia e sanitização de equipamentos.

ATENÇÃO

5.5. Produto corrosivo! Trabalhar em local ventilado. Para evitar contaminação, nunca retorne o produto ao frasco original. Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ao manusear o produto.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Realize a instalação em local limpo, seco, ventilado e protegido da luz solar direta.

6.2. Alimente o sistema apenas com água tratada conforme especificações do fabricante.

6.3. Realize a troca periódica dos filtros, membranas e componentes internos.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1. Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica GEHAKA, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento.

7.2. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.

