

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POP
LAVAGEM DE VIDRARIAS**

ARAGUAÍNA
2026



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

Tipo de Documento	Procedimento Operacional Padrão	POP.IFTO 001
Título do Documento	Lavagem de Vidrarias	EMIÇÃO: 23/02/2026
		VERSÃO: 01

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Definição:

1.1 A lavagem de vidrarias consiste no conjunto de procedimentos padronizados destinados à remoção de resíduos físicos, químicos e biológicos presentes em materiais de vidro utilizados em laboratório, tais como béqueres, erlenmeyers, provetas, pipetas, buretas, balões volumétricos, tubos de ensaio, entre outros.

2. Objetivos:

2.1 Descrever procedimentos para a limpeza apropriada dos materiais/insumos laboratoriais (lâminas, tubos, ponteiros e vidrarias utilizadas durante a rotina dos laboratório.

2.2 Descrever os procedimentos para a secagem apropriada das vidrarias limpas para utilização.

3. Abrangência

3.1 Este documento aplica-se a todos os usuários dos laboratórios do IFTO-Campus Araguaína.

4. Instruções iniciais:

4.1 Na lavagem de vidrarias e materiais deve-se tomar todos os cuidados de biossegurança, uma vez que as mesmas podem conter resíduos orgânicos e/ou biológicos e sujidades potencialmente contaminantes.

4.2 Lembre-se sempre de utilizar luvas para manipular dos materiais, vidrarias entre outros.

4.3 O processo de secagem depende do tipo e característica(s) do insumo, pois o material volumétrico precisa de cuidados especiais, secagem a temperatura ambiente e as demais vidrarias secagem em estufa.

5. Procedimentos

5.1 Limpeza e Lavagem de Materiais :

5.1.1 Descartar os resíduos da análise;

5.1.2 Retirar os resíduos com água corrente e esponja dupla-face;

5.1.3 Deixar a vidraria de molho em solução detergente de acordo com a bula do fabricante;

5.1.4 Retirar o material da solução detergente e lavar com esponja;

5.1.5 Enxaguar com água corrente,removendo todo o detergente;

5.1.6 Deixar o material por alguns minutos em água destilada e enxaguá-lo;

5.1.7 Escorrer o excesso de água do material;

5.1.8 Levar o material para a estufa seguindo o procedimento de Secagem.

5.2 Secagem de vidrarias volumétricas

5.2.1 Após lavada e enxaguada (conforme o item 3.1) deixe a vidraria volumétrica (ex: pipeta volumétrica,proveta, e outros) secando à temperatura ambiente;

Nota: A vidraria deverá ser deixada em local limpo, próximo à pia, de maneira organizada, evitando desse modo quebras e mantendo a organização do laboratório;

5.2.2 Após secar, guarde as vidrarias nos locais de armazenamento.

5.3 Secagem de vidrarias comuns

5.3.1 A vidraria comum (não volumétrica) deve se seca em estufa de secagem e esterilização aproximadamente 60°C;

5.3.2 Certifique-se de que o material está limpo;


5.3.3 Coloque o material na estufa;

5.3.4 Deixe o material na estufa até que o mesmo esteja seco;

5.3.5 Retire da estufa;

5.3.6 Guarde nos locais de armazenamento indicados.

Fluxograma lavagem de vidrarias :

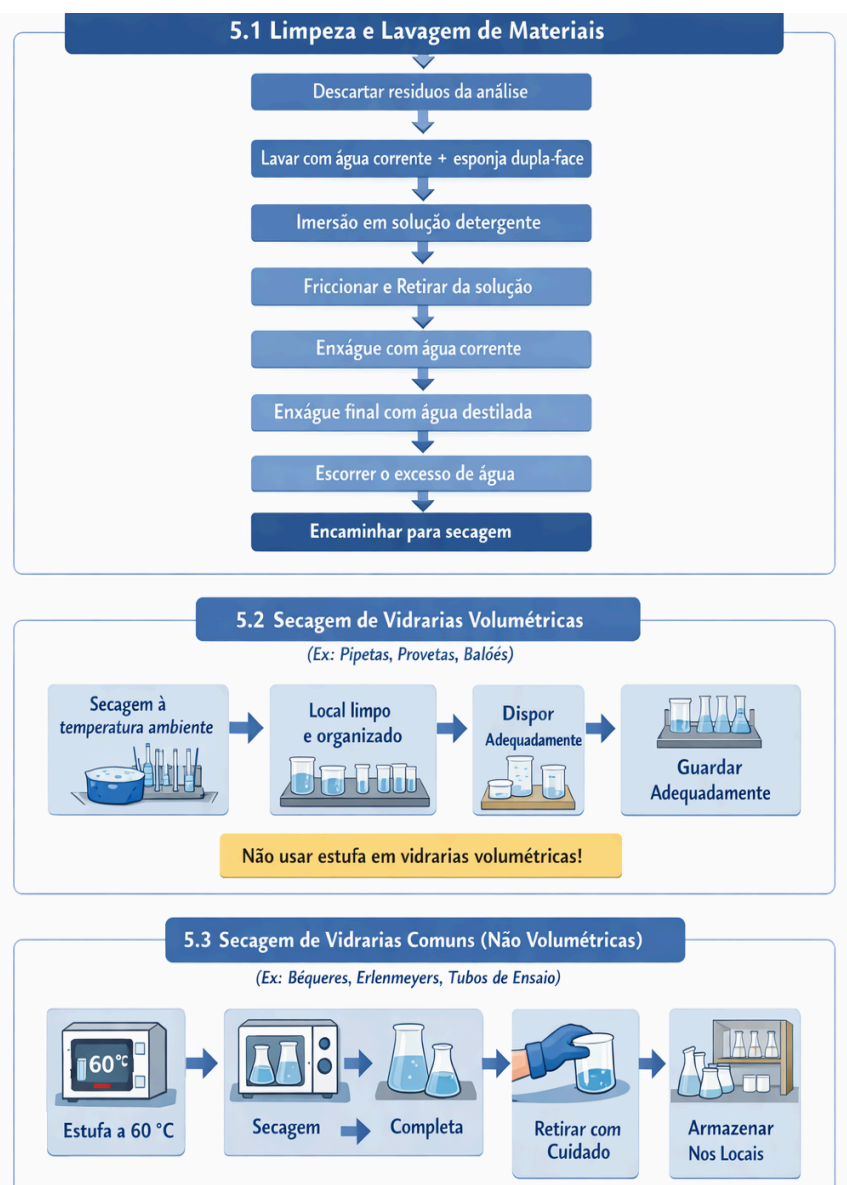

6.Referências :

SILVA, João P. Manutenção e Cuidados com Equipamentos Laboratoriais. 3. ed. São Pau

lo: Editora Científica, 2021.

OLIVEIRA, Ana. Procedimentos de lavagem e secagem de vidrarias laboratoriais. In: SOUZA, Roberto (Org.). Boas Práticas em Laboratórios de Pesquisa. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Laboratorial, 2022. p. 45-67.

COSTA, Maria. Eficácia dos métodos de secagem para vidrarias laboratoriais. Revista Brasileira de Laboratórios, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 110-123, jun. 2024.