

INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO

TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: DESTILADOR DE ÁGUA MODELO: SSDEST 10L/H MARCA: SOLID STEEL	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMISSÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: SOLID STEEL; MODELO : SSDEST 10L/H

1.2. Fornecedor: Solisteel Comércio LTDA.

1.3. Endereço: Rua Democlácio José Rossin, N.93 - CEP: 13413- 034- Piracicaba/SP

1.4.Site: www.solidsteel.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1- O destilador é usado para purificar líquidos, como água e solventes, separando substâncias por seus pontos de ebulição. É comum em laboratórios, indústrias e pesquisas.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- GABINETE E PAINEL DE CONTROLE

3.1.1- Chapa de aço carbono SAE 1020;

3.1.2- Alojamento para fixação na parede;

3.1.3- Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada, em aço inox e materiais inertes.

3.1.4- Capacidade 30 Litros.

3.2- PAINEL DE CONTROLE

3.2.1- Adesivo do painel em vinil.

3.2.2- Chave geral ON/OFF;

3.2.3- Luz piloto

3.3- ACESSÓRIOS INCLUSOS

3.3.1- Parafusos e buchas.



Fonte: Manual do Fabricante.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Verificar se a voltagem da rede elétrica é compatível com a selecionada no ato da compra do equipamento.

4.1.2- Efetuar a correta instalação na parede mantendo o nivelamento em 90°, evitando assim interferências no sensor de nível e resistência elétrica do equipamento.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:


4.2.1- Abrir o fluxo de água para encher a caldeira e, regular a máxima vazão de água para manter a alimentação da mesma (desde que não extravase pelo recipiente lateral);

4.2.2- Conectar a tomada na rede elétrica e acionar o botão "ON/OFF" de funcionamento;


4.2.3- Ao final do uso do equipamento, posicionar o botão de funcionamento em "OFF", manter a água ligada por mais 2 minutos. Após isso, desligar a água totalmente.



A mangueira de descarte "F" não pode ter emenda

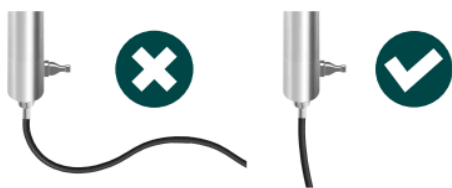


A mangueira de saída de água "E" não pode ser colocada horizontalmente, para que não se acumule água nela

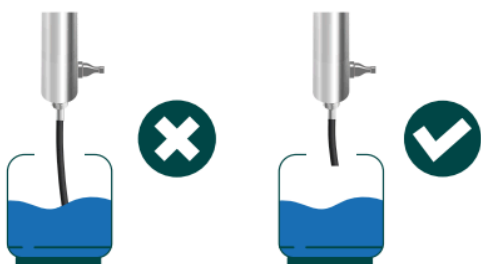

A mangueira de saída de água "E" não pode ter sua saída obstruída

DETALHES DO DESTILADOR

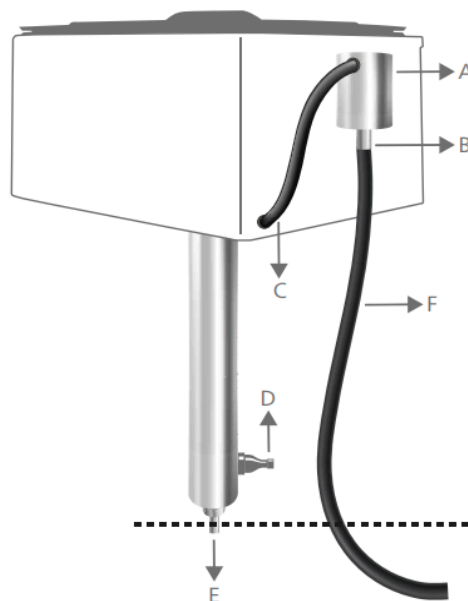

- A. Nível de água (1cm da borda)
- B. Saída de água não utilizada;
- C. Mangueira que faz o caminho da água até a parte interna do equipamento;
- D. Entrada de água;
- E. Saída de água destilada;
- F. Mangueira (a curva da mangueira deve ficar abaixo do ponto "D");

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Retire o plugue da tomada, aguarde o resfriamento e drene toda a água da caldeira pelo registro.

5.2- Adicione vinagre diluído (1:1) ou desincrustante, deixe agir por 30 minutos, descarte e enxágue com água destilada até sair limpa.

5.3- Limpe a parte externa com pano úmido e detergente neutro, monte novamente e realize um ciclo com água limpa, descartando o primeiro volume.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Não ligar o equipamento sem líquido.

6.2- O equipamento tem seu início de destilação da água entre 15 a 20 minutos.

6.3- Não derrame líquidos sobre a parte frontal do equipamento, evite danos elétricos.

6.4- Quando a luz piloto estiver acesa significa que o equipamento está energizado.

6.5- A utilização de medidas diferentes das mangueiras acima citadas, podem comprometer o fluxo de água e acarretar prejuízos e danos diversos. .

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- A manutenção preventiva do destilador nunca molhe as partes elétricas ou derrame líquido no interior do equipamento. Promover limpeza periódica com pano úmido sem fazer uso de agentes químicos. Realizar os procedimentos de esterilização de acordo com as normas adequadas, nunca altere qualquer característica construtiva ou operacional do equipamento.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO BIOPROCESSO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: LAVA-OLHOS MODELO: MARCA: GENEBRE	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante:Genebre;

1.2. Fornecedor: Genebre do Brasil LTDA

1.3. Endereço: Cajamar/SP

1.4.Site:htt/ www.genebre.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Equipamento de proteção coletiva (EPC) imprescindível a todos os laboratórios. Destinado a eliminar ou minimizar os danos causados por acidentes nos olhos e/ou face e em qualquer parte do corpo.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- PEÇAS:

3.1.1- Chave Liga/Desliga

3.1.2- Dois pequenos chuveiros.

3.1.3- bacia de aço inox.

3.1.4- Válvulas



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Sua instalação deverá ser em local de fácil acesso para toda a equipe técnica e no máximo a 10 segundos de distância do risco de acidente químico.

4.1.2- A localização do equipamento de emergência deverá ser identificada mediante sinalização bem visível.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- . Acionar a placa “Empurre”, segurar as pálpebras bem abertas com os dedos.

4.2.2- . Utilizar o equipamento por 15 minutos.

4.2.3- . O seu acionamento deverá ser através de alavancas acionadas pelas mãos, cotovelos ou joelhos.

4.2.4- A válvula deverá permanecer aberta, após acionada, sem que o usuário tenha de usar as mãos. A válvula deve ser de fácil operação e poder passar da posição “fechada” à posição “aberta” no tempo de um segundo ou menos.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Limpeza do equipamento (Nunca fazer a limpeza com o equipamento ligado)

5.2- Remova sujeiras visíveis com pano limpo ou escova macia.

5.3- Lave as bicas e a tigela com água e sabão neutro.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Observar se o fio terra está conectado.

6.2- Não colocar a centrífuga em funcionamento com a cúpula aberta.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Para todo tipo de manutenção corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica. Não permita que terceiros sem especialização técnica adequada realizem manutenções nos equipamentos, evitando assim possíveis danos ou mudanças nas características originais do equipamento. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.