



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: MICRÓTOMO MODELO: MRP 2015 MARCA: LUPETEC	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Lupetec; MODELO MRP 2015

1.2. Fornecedor: Lupe Ind.Tec.de Equip.para Laboratoriol LTDA.

1.3. Endereço: Avenida Romualdo Villani , 728 - CEP: 13.563-651- Jardim Ipanema São Carlos/SP

1.4.Site: www.lupetec.ind.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. O Micrótomo é utilizado para produzir cortes finos em amostras com diferentes graus de dureza, tanto para aplicações de rotina, como de pesquisa na biologia, na medicina e na indústria. Foram projetados para fazer cortes em materiais moles incluídos em parafina, assim como em amostras mais duras, desde que tais

amostras ainda sejam adequadas para seccionamento manual. Qualquer outro uso do aparelho é considerado indevido.


3. Componentes do Equipamento:

3.1- PEÇAS:

- 3.1.1- Portas-navalha para lâminas descartáveis;
- 3.1.2- Prendedor de amostras padrão;
- 3.1.3- Prendedor universal de cassetes;
- 3.1.4- Base do porta-navalha com recurso para deslocamento lateral;
- 3.1.5- Acessório fixo para prendedores de amostras orientável;
- 3.1.6- Cassete padrão.

3.3- CAPACIDADE E COMPONENTES

- 3.3.1- Comprimento do Equipamento: 515 mm;
- 3.3.2- Largura do Equipamento: 417 mm
- 3.2.3- Peso: 32 kg;

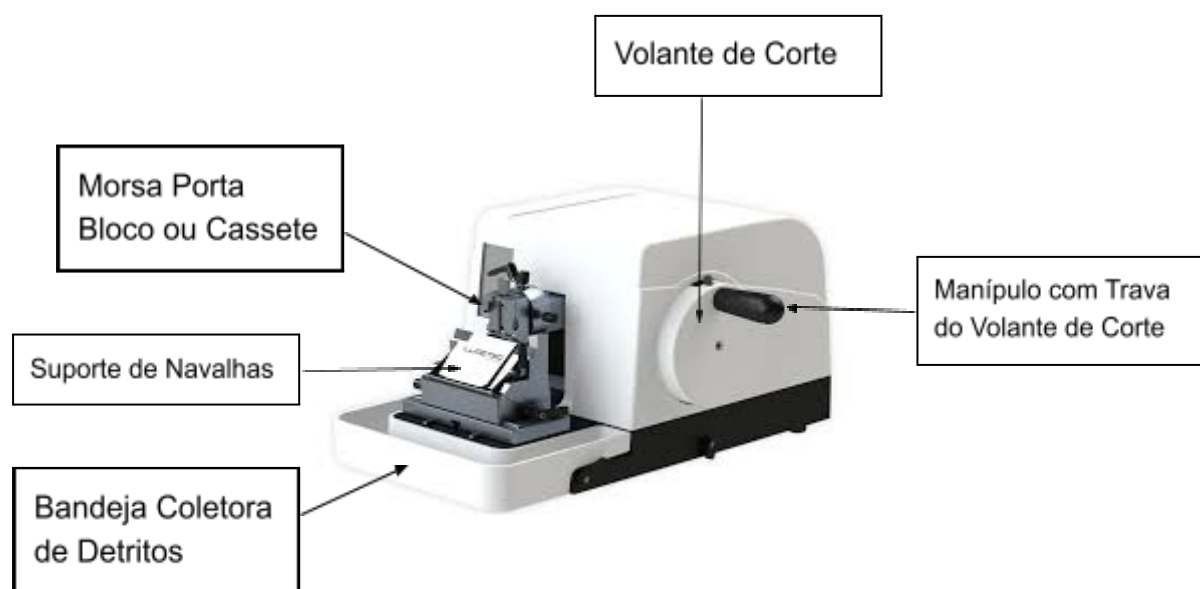

Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Bancada de laboratório estável, isenta de vibrações com a parte superior horizontal e uniforme.

4.1.2- Ausência de aparelhos nas vizinhanças que possam provocar vibrações.

4.1.3- Acesso fácil e desobstruído tanto para a roda de mão quanto para a roda de avanço horizontal.

4.1.4- Temperatura ambiente permanentemente entre + 10 °C e 40 °C

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Trave o volante (posição 13h – pressione o cabo para dentro).

4.2.2- Cubra o fio da navalha com o protetor.

4.2.3- Com o volante travado e o suporte na posição mais alta, insira o bloco da amostra.

4.2.4- Depois, instale a navalha descartável.

4.2.5- Mantenha o recuo ativado (alavanca na posição 12h).

4.2.6- Se ouvir o alarme de fim de curso, gire o volante menor no sentido contrário (recuar).

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Use pincel seco para remover resíduos.

5.2- Limpe com pano úmido e produto neutro (sem álcool, acetona, xilol ou abrasivos).

5.3- Evite a entrada de líquidos no aparelho.

5.4- Seque tudo com pano limpo.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Mantenha as mãos afastadas da lâmina e ative o freio quando não estiver cortando.

6.2- Remova resíduos de parafina e tecidos após o uso com pano macio, sem usar solventes agressivos.

6.4- Verifique partes móveis e fixações regularmente. A manutenção deve ser feita por profissional autorizado.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- A manutenção do micrótomo inclui limpeza após o uso, verificação da fixação e alinhamento da lâmina, lubrificação das partes móveis e inspeções periódicas. Evite solventes agressivos e sempre recorra à assistência técnica autorizada para calibração e reparos.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.